

pH Neutral - Informacije o proizvodu

Opis proizvoda


U slučaju ozljede očiju uzrokovane kiselinom ili lužinom ispirajte oko našim sredstvom za ispiranje očiju pH Neutral 2 minuta. Ergonomski oblikovani poklopac boce omogućuje ispiranje očiju ravnomjernim i blagim mlazom tekućine za ispiranje. Prilikom ispiranja očiju lagano stisnite bočicu! Specijalno oblikovane DUO bočice omogućuju istovremeno ispiranje oba oka. Naša sredstva za ispiranje očiju klasificirana su kao medicinska sredstva prema direktivi EU 92/42/EEC. Sigurnosti list proizvoda možete preuzeti s naše web stranice.



Kada upotrijebiti pH Neutral?

Sredstvo za ispiranje očiju pH Neutral je 4,9%-tni fosfatni pufer koji učinkovito neutralizira kisele ili lužnate kemikalije, te na najbrži mogući način pomaže normalizirati pH-vrijednost očiju. Čista voda ili 0,9%-tna sterilna otopina natrijevog klorida samo razrjeđuju te kemikalije (slika 1), ali ne smanjuju njihovo nagrizajuće djelovanje. Nakon korištenja pH Neutrala preporučujemo da nastavite ispiranje Plum sredstvom za ispiranje očiju s 0,9%-tnom otopinom natrijevog klorida sve dok ne dođete do liječnika! VAŽNO! U slučaju ozljede oka uvijek se obratite liječniku!

Slika 1: Neutralizirajuće djelovanje proizvoda pH Neutral i 0,9%-tne otopine natrijevog klorida

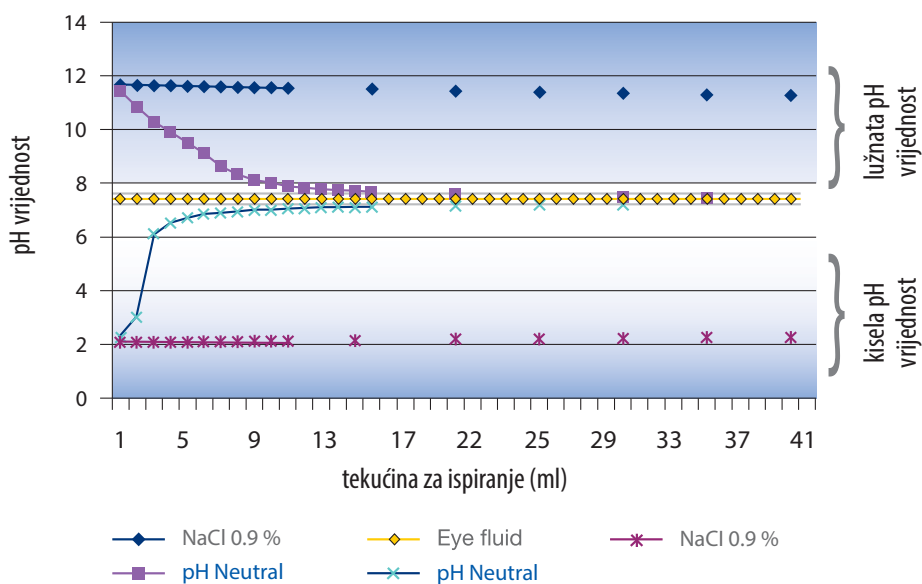

Test (in vitro) je izvršen u laboratoriju Plum A/S (in vitro). Prilikom testa otopini od 40 ml vode i 1 kapi sumporne kiseline odnosno 40 ml vode i 1 kapi kalijevog hidroksida postepeno je dodan pH Neutral odnosno 0,9%-tna otopina natrijevog klorida. Pri tome su mjerene promjene pH vrijednosti i količina tekućine potrebne za ispiranje.



Prednosti sredstva za ispiranje očiju:

- Visoka razina funkcionalnosti: boce su proizvedene u skladu s propisima DIN EN 15154-4.
- Fleksibilna rješenja: bočice su dostupne u različitim veličinama, mogu se primijeniti i na mobilnim radnim stanicama, ili čak montirati na zid u sklopu stanice za ispiranje očiju.
- Opsežna uporaba (npr. u industrijskom sektoru, u laboratorijima, kao dio kompleta prve pomoći, mobilna uporaba u vozilima, itd.).
- Jednostavno za korištenje - ozlijeđena osoba može započeti ispiranje bez pomoći druge osobe.
- Rok trajanja sredstva je 3 godine u neotvorenom stanju.
- Bočice ne zahtijevaju održavanje, niti izmjenu tekućine.

Kako koristiti Plum sredstvo za ispiranje očiju?



Izvadite bocu iz stanice.



Okrenite poklopac u smjeru strelice do loma sigurnosnog prstena.



Nagnite glavu prema nazad i počnite s ispiranjem.



Prilikom ispiranje možete se nagnuti i prema naprijed, na taj način će vaša odjeća ostati suha.

Upute za uporabu

Proizvod je namijenjen za jednokratnu uporabu! Ne koristite proizvod nakon isteka roka valjanosti (datum isteka nalazi se na etiketi)! Važno je da sigurnosni prsten na poklopcu bude neoštećen, jer se jedino na taj način može osigurati sterilno ispiranje! Ne koristite proizvod ako je prsten već oštećen, jer postoji opasnost od infekcije!

Pakiranja

Sadržaj	200 ml	500 ml Duo	1000 ml tuš za ispiranje očiju
Broj artikla	4691	4604	4707
Trajanje ispiranja	oko 2 minuta	oko 2 minuta po oku	oko 2 minuta
Veličina	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm