

pH Neutral - Informacije o izdelku

Opis izdelka


V primeru poškodbe oči, povzročene s kislino ali lugom, izpirajte oko s pomočjo našega sredstva za izpiranje oči pH Neutral 2 minuti. Ergonomsko oblikovan pokrov plastenke omogoča izpiranje oči z enakomernim in nežnim brizgom tekočine za izpiranje. Med izpiranjem oči nežno stisnite plastenko! Posebej oblikovane plastenke DUO omogočajo istočasno izpiranje obeh oči. Naša sredstva za izpiranje oči so klasificirana kot medicinski pripomočki v skladu z Direktivo EU 92/42/EGS. Varnostni list izdelka lahko prenesete z naše spletne strani.



Kdaj je treba uporabiti sredstvo pH Neutral?

Sredstvo za izpiranje oči pH Neutral je 4,9 % fosfatni pufer, ki učinkovito nevtralizira kisle ali alkalne raztopine ter na najhitrejši možni način pomaga nevtralizirati pH vrednost oči. Čista voda ali 0,9 % sterilna raztopina natrijevega klorida samo razredčita te kemikalije (slika 1), ne zmanjšata pa njihovega jedkega delovanja. Po uporabi sredstva pH Neutral priporočamo, da izpiranje nadaljujete s sredstvom za izpiranje oči Plum z 0,9 % raztopino natrijevega klorida, dokler ne pridete do zdravnika! POMEMBNO! V primeru poškodbe oči vedno poiščite zdravniško pomoč!

Slika 1: Nevtralizacijsko delovanje izdelka pH Neutral in 0,9 % raztopine natrijevega klorida

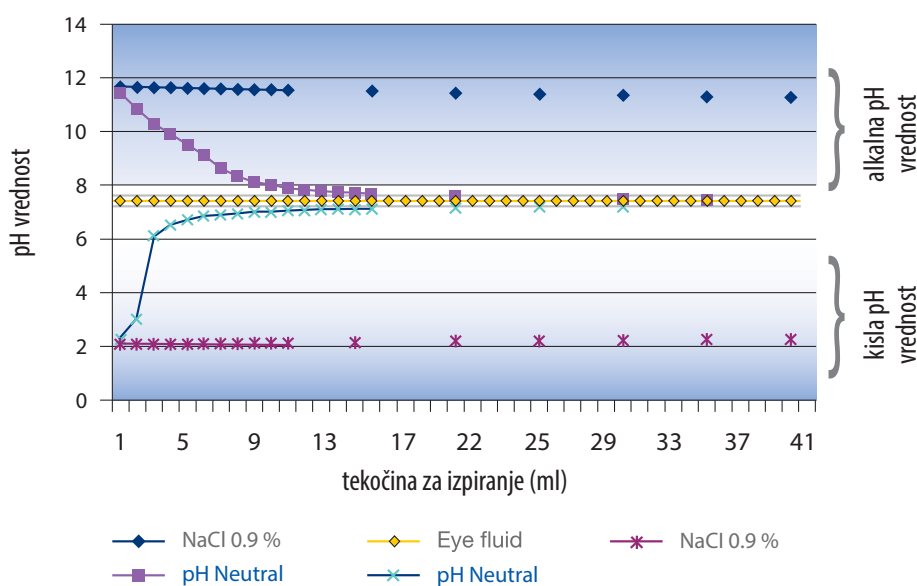

Test (in vitro) je narejen v laboratoriju Plum A/S (in vitro). V okviru testa je raztopini 40 ml vode in 1 kapljice žveplove kisline oz. 40 ml vode in 1 kapljice kalijevega hidroksida dodan pH Neutral oz. 0,9 % raztopina natrijevega klorida. Pri tem so bile merjene spremembe pH vrednosti in količina tekočine, ki je potrebna za izpiranje.



Prednosti sredstva za izpiranje oči:

- Visoka stopnja funkcionalnosti: platenke so izdelane v skladu s predpisi DIN EN 15154-4.
- Prilagodljive rešitve: platenke so na voljo v različnih velikostih, uporabljajo se lahko tudi na mobilnih delovnih postajah ali celo namestijo na steno znotraj postaje za izpiranje oči.
- Široka uporaba (npr. v industriji, v laboratorijih, kot del škatle prve pomoči, mobilna uporaba v vozilih itn.).
- Enostavna uporaba – poškodovana oseba lahko začne z izpiranjem brez pomoči druge osebe.
- Rok uporabe sredstva je 3 leta v zaprti embalaži.
- Platenke ne potrebujejo vzdrževanja ali zamenjave tekočine.

Kako uporabljati sredstvo za izpiranje oči Plum?



Vzemite platenko iz postaje.



Obrnite pokrov v smeri puščice do zloma varnostnega obroča.



Glavo nagnite nazaj in začnite z izpiranjem.



Med izpiranjem se lahko nagnete tudi naprej, da bodo na ta način vaša oblačila ostala suha.

Navodila za uporabo

Izdelek je namenjen enkratni uporabi! Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe (datum uporabe se nahaja na etiketi)! Pomembno je, da varnostni obroč na pokrovu ostane nepoškodovan, saj je edino na ta način mogoče zagotoviti sterilno izpiranje! Ne uporabljajte izdelka, če je obroč že poškodovan, saj obstaja nevarnost okužbe!

Pakiranja

Vsebina	200 ml	500 ml Duo	1000 ml tuš za izpiranje oči
Številka izdelka	4691	4604	4707
Čas izpiranja	pribl. 2 minuti	pribl. 2 minuti na oko	pribl. 2 minuti
Velikost	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm