

PH Neutral – Informácie o výrobku

Opis výrobku


Očná sprcha pH Neutral poskytuje 2 minútové riešenie vyplachovania pri očných úrazoch spôsobených kyselinami a lúhmi. Ergonomický uzáver fľaš zabezpečuje, aby prúd vyplachovacej tekutiny bol jemný a rovnomerný. Fľašu jemne stláčajte počas vyplachovania! Špeciálne tvarovanie DUO fľaší umožňuje súčasné vyplachovanie oboch očí. Naše očné sprchy sa považujú za lekársku pomôcku na základe smernice EU 93/42/EEC. Príslušné karty bezpečnostných údajov sú dostupné k stiahnutiu na našej webovej stránke.



V akých prípadoch používajte pH Neutral?

pH Neutral je 4,9 % fosfátový pufer, ktorý účinne neutralizuje kyseliny a lúhové prípravky a v najkratšom možnom čase pomôže navodiť normálnu pH hodnotu oka. Čistá voda alebo 0,9 % sterilný soľný roztok iba rozriedia tieto látky (obr. 1) a ich leptavý účinok vedie iba zmierniť. Po použití pH Neutralu odporúčujeme, aby ste pokračovali vyplachovanie očnou sprchou Plum s obsahom 0,9 % soľného roztoku, až kým sa dostanete k lekárovi! Dôležité! V prípade očných úrazov sa vždy obráťte na lekára!

1. obr. Neutralizačný účinok pH Neutral a 0,9 %-ného soľného roztoku

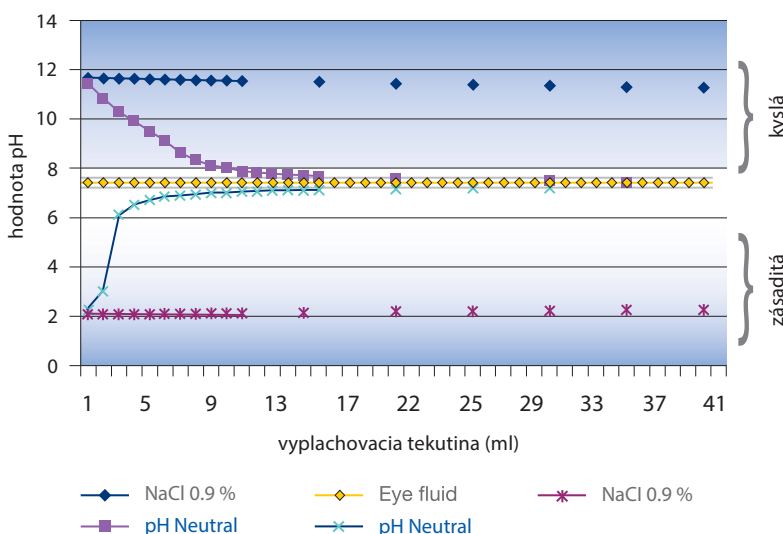

V laboratóriu Plum A/S bol vykonaný test (in vitro). Počas testu pridávali po krokoch Ph Neutral a chlorid sodný do takeého roztoku, ktorý pozostával z 40 ml vody a 1 kvapky kyseliny sírovej, respektive z 40 ml vody a 1 kvapky hydroxidu a draselného. Merali zmenu hodnoty pH a množstvo použitej vyplachovacej tekutiny.



Prednosti očnej sprchy:

- Funkcionalita na vysokej úrovni: fľaše sú vyrábané v zhode s certifikáciou DIN EN 15154-4.
- Flexibilné riešenie: fľaše sú dostupné vo viacerých veľkostiach, dajú sa používať na mobilných pracoviskách, alebo sa dajú namontovať na stenu aj ako súčasť očných staníc.
- Širokospektrálne možnosti používania (napr. v priemyselnom sektore, v laboratóriách, ako súčasť lekárníčky, vo vozidlách, atď.)
- Jednoduché použitie - zranené osoby samé, aj bez pomoci dokážu používať naše očné sprchy.
- Doba expirácie v neporušenom balení: 3 roky
- Fľaše nepotrebujú údržbu, ani výmenu tekutiny.

Ako používať očnú sprchu Plum?



Vyberte fľašu zo stanice.



Otáčajte uzáverom v smere šípky, až kým sa poistný prstenec neodlomí.



Nakloňte hlavu dozadu a jemným stláčaním fľaše začnite vyplachovanie.



Vyplachovať môžete aj v predklone, predídete tak poliatiu odevu

Návod na používanie

Výrobok je vhodný na jednorázové použitie! Nepoužívajte po uplynutí doby expirácie (dátum konečnej spotreby je uvedený na obale)! Je dôležité, aby poistný prstenec na uzávere bol neporušený, len tak je možné zabezpečiť sterilné vyplachovnie! Ak sa poistný prstenec poškodil, nepoužívajte znovu výrobok, lebo existuje riziko kontaminácie.

Balenia

Objem	200 ml	500 ml Duo	1000 ml očná sprcha
Číslo materiálu	4691	4604	4707
Doba vyplachovania	Cca 2 minúty	Cca 2 minúty/ oko	Cca 2 minúty
Rozmery	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm