



## pH Neutral - Informacije o proizvodu

### Prednosti proizvoda:


U slučaju povrede očiju uzrokovane kiselinom ili bazom ispirajte oko našim sredstvom za ispiranje očiju pH Neutral 2 minuta. Ergonomski oblikovan poklopac bočice omogućava ispiranje očiju ravnomernim i blagim mlazom tečnosti za ispiranje. Prilikom ispiranja očiju lagano stisnite bočicu! Specijalno oblikovane DUO bočice omogućavaju istovremeno ispiranje oba oka. Naša sredstva za ispiranje očiju klasifikovana su kao medicinska sredstva u skladu sa direktivom EU 92/42/EEC. Sigurnosti list proizvoda možete preuzeti sa naše web stranice.



### Kada upotrebiti pH Neutral?

Sredstvo za ispiranje očiju pH Neutral je 4,9%-tni fosfatni pufer koji efikasno neutrališe kisele i bazne hemikalije, te na najbrži mogući način pomaže u normalizovanju pH-vrednosti očiju. Čista voda ili sterilan rastvor natrijum hlorida 0.9% samo razređuju te hemikalije (slika 1) ali ne smanjuju njihovo nagrizajuće dejstvo. Nakon korišćenja pH Neutrala nastavite ispiranje Plum sredstvom za hitno ispiranje očiju sve dok ne dođete do lekara! VAŽNO! U slučaju povrede očiju uvek se obratite lekaru!

Slika 1: Neutralizirajuće dejstvo proizvoda pH Neutral i rastvora natrijum hlorida 0,9%

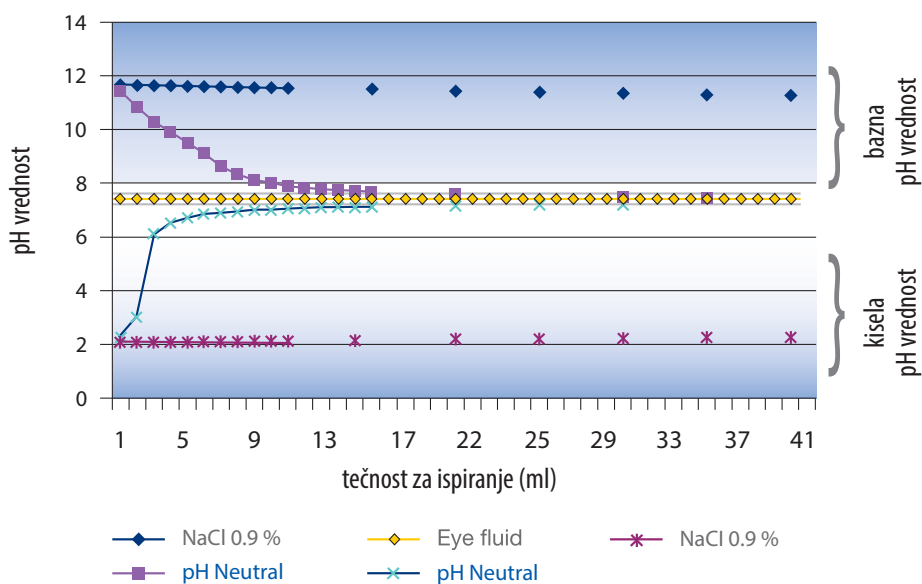

Test (in vitro) je izvršen u laboratoriji Plum A/S (in vitro). Prilikom testa rastvoru od 40 ml vode i 1 kapi sumporne kiseline odnosno 40 ml vode i 1 kapi kalijum hidroksida postepeno je dodan pH Neutral i 0.9%-tni rastvor natrijum hlorida. Pri tome su merene promene pH vrednosti i količina tečnosti potrebne za ispiranje.

# pH Neutral - Informacije o proizvodu



## Prednosti sredstva za ispiranje očiju:

- Visok nivo funkcionalnosti: boce su proizvedene u skladu sa kvalifikacijom prema DIN EN 15154-4.
- Fleksibilna rešenja: bočice su dostupne u različitim veličinama, mogu se primeniti i na mobilnim radnim stanicama, ili čak montirati na zid u sklopu stanice za ispiranje očiju.
- Široka upotreba (npr. u industrijskom sektoru, u laboratorijama, kao deo kompleta prve pomoći, mobilna upotreba u vozilima, itd.).
- Jednostavno za korišćenje - povređena osoba može započeti ispiranje bez pomoći druge osobe.
- Rok trajanja proizvoda u neotvorenom stanju je 3 godine.
- Bočice ne zahtevaju održavanje, niti izmenu tečnosti.

## Kako koristiti Plum sredstvo za ispiranje očiju?



Izvadite bočicu iz stanice.



Okrenite poklopac u smeru strelice do loma sigurnosnog prstena.



Nagnite glavu prema nazad i počnite sa ispiranjem.



Prilikom ispiranja možete se nagnuti i prema napred, na taj način će vaša odeća ostati suva.

## Uputstva za upotrebu

Proizvod je namenjen za jednokratnu upotrebu! Ne koristite proizvod nakon isteka roka upotrebe (datum isteka nalazi se na etiketi)! Važno je da bezbednosni prsten na poklopcu bude neoštećen, jer se jedino na taj način može obezbediti sterilno ispiranje. Ne koristite proizvod, ako je prsten već oštećen, jer postoji opasnost od infekcije!

## Pakovanja

Sadržaj stanice	200 ml	500 ml Duo	1000 ml tuš za ispiranje očiju
Broj artikla	4691	4604	4707
Trajanje ispiranja	oko 2 minuta	oko 2 minuta po oku	oko 2 minuta
Veličina	165 x ø 55 mm	220 x ø 75 mm	270 x ø 85 mm