

PRIM AJUTOR



SIGURANȚĂ LA
LOCUL DE MUNCĂ

Soluții pentru clătirea ochilor
Plasturi
Stații de prim ajutor

plum

Siguranță optimă. Prim ajutor de încredere.

Prin soluțiile PLUM de prim ajutor se poate minimaliza numărul accidentelor la locul de muncă și a efectelor negative ale acestora, în avantajul activității optime ai angajaților și a firmei.



Accidente ușoare sau mai grave se întâmplă zilnic. În aceste cazuri este important ca primul ajutor să fie rapid, imediat și profesional. Datorită ofertei noastre bogate de produse facem posibil ca împreună cu colegii Dvs. să puteți interveni cu ușurință în cazul tăieturilor, leziunilor, accidentelor oculare – într-un mod igienic și sigur. Stațiile de prim ajutor garantează, ca ajutorul să fie aproape și în cazul accidentelor ușoare.

SOLUȚII PERSONALIZATE CONFORM EXIGENȚELOR LOCULUI DVS. DE MUNCĂ

Vă oferim o gamă bogată a produselor de prim ajutor, printre care soluții pentru clătirea ochilor, plasturi, șervețele pentru curățarea rănilor, și multe altele... Dvs. puteți selecta simplu acele produse de care aveți nevoie la locul de muncă. Lucrați la birou? În laborator cu substanțe chimice? În domeniul industriei alimentare? Eventual într-un service auto? În orice mediu de lucru puteți utiliza produsele Plum.

” APROAPE ȘI-A PIERDUT VEDEREA DIN CAUZA UNUI FURTUN SLĂBIT...

Hanstholm Fiskemelnsfabrik dispune de o unitate avansată de producție, însă până acum câțiva ani întreprinderea a fost dotată doar cu soluție generală pentru clătirea ochilor. Pentru acest lucru un muncitor a plătit scump: un furtun a slăbit iar o soluție alcalină i-a pătruns în ambii ochi, era să-și piardă vederea în totalitate. După accident întreprinderea a atribuit o atenție sporită primului ajutor adecvat. „Dacă pe vremea aceea aveam soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral DUO, finalul accidentului ar fi fost mai puțin tragic. Astăzi este întotdeauna la îndemână „, a declarat Ronni Jorgensen, directorul de achiziții al companiei.



Soluția verde pentru clătirea ochilor Plum ajută la îndepărtarea prafului și corpurilor străine din ochi.

Soluția albastră pentru clătirea ochilor pH Neutral asigură ajutor imediat în cazul leziunilor provocate de acizi sau soluții alcaline.

Flacoanele se utilizează ușor și asigură o clătire continuă și delicată ochilor.

Utilizarea adecvată a soluției pentru clătirea ochilor este indicată prin pictograme.

Recipientul din plastic moale pentru clătirea ochilor este realizat în așa fel, încât să se muleze după forma ochilor. Presați ușor înainte de ajustarea la ochi. Astfel capacul ajută la ținerea în poziție deschisă a ochilor pe întregul timp al clătirii, asigurând clătirea totală ale acestora.

Se deschide ușor și rapid. O singură răsucire și soluția pentru clătirea ochilor este gata pentru utilizare.

Ambalaj economic, cu valabilitate chiar și până la 3 ani. Data de valabilitate este trecută în mod vizibil pe partea din față a etichetei.

Soluția ergonomică DUO pentru clătirea ochilor este potrivită pentru clătirea concomitentă ai ambilor ochi. Recipientul pentru clătire ajută la ținerea în poziție deschisă ai ambilor ochi pe durata întregă a procesului de clătire.



Ne-am gândit la toate.

Soluția verde Plum pentru clătirea ochilor oferă ajutor rapid pentru accidentele provocate de impuritățile mecanice. PH Neutral neutralizează substanțele acide și alcaline.

AVEȚI NUMAI DOI OCHI – SĂ AVEȚI GRIJĂ DE EI!

Vederea este unul dintre cele mai importante simțuri. Prin urmare aveți grijă de ochii Dvs. Se pot întâmpla accidente în orice moment. Nu putem preveni aceste accidente de fiecare dată, însă trebuie să fim pregătiți să acordăm imediat primul ajutor. Atunci când are loc un accident care afectează ochiul, fiecare secundă contează! Cea mai mică întârziere poate avea un efect fatal asupra vederii Dvs. De aceea este foarte important accesul rapid la soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor.

SOLUȚII UNICE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR

Datorită gamei noastre largi de produse puteți selecta foarte simplu cea mai optimă soluție pentru compania Dvs. Puteți alege dintre stațiile ce pot fi montate pe perete, direct la locul de muncă. Sau puteți alege produse mai mici, ușor portabile, care pot fi montate în autoturisme, pot fi păstrate în lada de scule, sau în cutia de prim ajutor, - eventual într-o geantă specială la brâu.



Flacoanele pentru clătirea ochilor sunt marcate cu însemnul CE.

Să prevenim accidentele oculare!

Soluția pentru clătirea ochilor Plum îndepărtează impuritățile, praful și murdăria din ochi, iar soluția pentru clătirea ochilor PH Neutral neutralizează substanțele acide și alcaline.

Produsele noastre au fost dezvoltate în colaborare cu specialiști oftalmologi. Aceasta înseamnă că ne-am gândit la toate detaliile în vederea realizării optime a soluției pentru clătirea ochilor. Pictogramele vă ajută la utilizarea corectă. Capacul vă ajută la menținerea în poziție deschisă a ochilor. Astfel prin clătire se ajunge la locul potrivit al ochiului, în mod constant, în cantitate optimă.



Soluția pentru clătirea ochilor Plum se folosește simplu în cazul accidentelor oculare.



Răsuciți capacul în direcția indicată de săgeată până când se rupe sigiliul.



Aplecați-vă în spate, presați flaconul și începeți clătirea.



După aceea ochiul poate fi clătit și dacă vă aplecați puțin în față.

PLAN DE PRIM AJUTOR ÎN CAZUL ACCIDENTELOR OCULARE

1	2	3	4
Determinați natura leziunii	Selectați soluția corespunzătoare pentru clătirea ochilor	Continuați clătirea	Clătiți ochiul conform celor descrise
Corpuri străine praf, funingine, așchii din lemn și metal	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Clătiți ochiul până când contaminările vor fi eliminate complet.
Substanță acidă	pH Neutral	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Clătiți ochiul timp de aproximativ 2 minute cu soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral, după care continuați cu Soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum (soluție salină fiziologică), până ajungeți la medic.
Substanță alcalină	pH Neutral	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Clătiți ochiul timp de aproximativ 2 minute cu soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral, după care continuați cu Soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum (soluție salină fiziologică), până ajungeți la medic.
Alte substanțe chimice	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum	Clătiți ochiul până ajungeți la medic.

Asigurați-vă întotdeauna că soluția pentru clătirea ochilor intră în ochi în forma unui jet constant. În cazul în care ambii ochi au fost afectați în accident, utilizați soluția DUO pentru clătirea ochiului.



Soluție unică

În prezent nu există pe piață o opțiune similară soluției pentru clătirea ochiului Plum DUO. De acum încolo nu trebuie să alegeți care ochi să vă fie salvat.

50% DIN ACCIDENTELE OCULARE AFECTEAZĂ AMBII OCHI.

Studiile au arătat că accidentele oculare chimice afectează în proporție de 50% ambii ochi. Cu soluția DUO pentru clătirea ochilor puteți fi pregătit în cazul acestor pericole.

CAPACUL AJUTĂ LA CLĂTIREA OPTIMĂ.

Factorul de timp nu trebuie subapreciat, mai ales dacă este vorba despre accidente chimice. Măsura leziunii bineînțeles depinde atât de concentrația acidului sau soluției alcaline, cât și de timpul contactului acestora cu ochii. De aceea primul ajutor optim trebuie să neutralizeze cât mai repede substanțele dăunătoare.

Prin realizarea sa capacul DUO se ajustează după forma ochiului pentru a-l putea menține în poziție deschisă pe întreaga perioadă de clătire – asigurând constanța și timpul adecvat de clătire.

Soluțiile de prim ajutor Plum pentru clătirea ochilor sunt produse de unică folosință. Doar astfel se poate asigura ca soluția pentru clătire să rămână sterilă.



Soluție pentru clătirea ochilor în cazul leziunilor mecanice

Soluția de prim ajutor Plum pentru clătirea ochilor oprește senzația neplăcută de arsură în ochi provocată de materialele străine, impurități, și ajută la prevenirea complicațiilor ulterioare.

Corpuri străine pot pătrunde cu ușurință în ochi. Praf, murdărie sau vopsea de pe mână... Există un risc mai ridicat la locurile de muncă unde prin utilizarea aparatelor, uneltelor de lucru așchii de lemn și metal pot pătrunde în ochi.

Chiar și cele mai mărunte impurități pot fi foarte neplăcute. Fără tratament însă cele mai mici leziuni pot provoca inflamarea ochiului, ale corneei sau al irisului. Dacă imediat după leziune aplicați clătirea ochiului, puteți preveni apariția inflamației, respectiv ca materialul străin să rămână în ochi.

Soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum conține soluție de clorură de sodiu de 0,9%, asigurând clătirea constantă și delicată a ochilor. În gama de produse veți găsi atât flaconul cel mai mic, ușor de utilizat, pe care îl puteți purta întotdeauna asupra dvs., cât și cel care poate fi montat pe perete, flacon mare, care vă ajută la tratarea imediată a accidentelor oculare la locul de muncă.



**200 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU
CLĂTIREA OCHILOR PLUM**

Acest flacon mic, ușor de utilizat încapă în cel mai mic buzunar al halatului. Soluția pentru clătirea ochilor conține soluție sterilă de clorură de sodiu de 0,9%. Flaconul poate fi purtat cu ușurință într-o geantă de brâu specială, în cutia de prim ajutor, sau în cutia de scule. Prevăzut cu capac antipraf.

Durată clătire: aprox. 2 min.
Prezentare: 10 x 200 ml
Cod produs: 4691



**500 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU
CLĂTIREA OCHILOR PLUM**

Produs pentru clătirea ochilor cu conținut de soluție sterilă de clorură de sodiu de 0,9%, în flacon ușor de manipulat. Poate fi utilizat individual, dar este potrivit și pentru reîncărcarea stațiilor pentru clătirea ochiului. Prevăzut cu capac antipraf.

Durată clătire: aprox. 5 min.
Prezentare: 12 x 500 ml
Cod produs: 4604



**1000 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU
CLĂTIREA OCHILOR PLUM**

Produs pentru clătirea ochilor cu conținut de soluție sterilă de clorură de sodiu de 0,9%. Datorită flaconului de 1000 ml asigură un timp mai lung de clătire. Poate fi utilizat individual, dar este potrivit și pentru reîncărcarea stațiilor pentru clătirea ochiului. Prevăzut cu capac antipraf.

Durată clătire: aprox. 10 min.
Prezentare: 6 x 1000 ml
Cod produs: 4707



**500 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU
CLĂTIREA OCHILOR PLUM DUO**

Produs pentru clătirea ochilor cu conținut de soluție sterilă de clorură de sodiu de 0,9%, în flacon ușor de manipulat. Design-ul DUO permite clătirea simultană a ambilor ochi. Poate fi utilizat individual, dar este potrivit și pentru reîncărcarea stațiilor pentru clătirea ochiului.

Durată clătire: aprox. 2 min.
Prezentare: 6 x 500 ml
Cod produs: 4861



**1000 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU
CLĂTIREA OCHILOR PLUM DUO**

Produs pentru clătirea ochilor cu conținut de soluție sterilă de clorură de sodiu de 0,9%, în flacon ușor de manipulat. Datorită flaconului de 1000 ml asigură un timp mai lung de clătire. Design-ul DUO permite clătirea simultană a ambilor ochi. Poate fi utilizat individual, dar este potrivit și pentru reîncărcarea stațiilor pentru clătirea ochiului.

Durată clătire: aprox. 5 min.
Prezentare: 6 x 1000 ml
Cod produs: 4800



**3 X 500 ML
SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU
CLĂTIREA OCHILOR PLUM**

Trusă practică pentru clătirea ochilor, cu 3 flacoane de 500 ml, cu conținut de soluție sterilă de clorură de sodiu de 0,9%. Cutia este ușor de transportat, o putem duce în mașină până ajungem la medic. Flacoanele pot fi utilizate și individual, dar sunt potrivite și pentru reîncărcarea stațiilor pentru clătirea ochiului.

Durată clătire: aprox. 15 min.
Prezentare: 4 x 3 x 500 ml
Cod produs: 4620

Clătirea ochiului în cazul accidentelor chimice

pH Neutral neutralizează
substanțele acide și al-
caline, respectiv în cur-
sul clătirii elimină ace-
ste substanțe din ochi.
Eficiență dovedită!

INFORMAȚII IMPORTANTE

În cazul leziunilor oculare cau-
zate de fluorură de hidrogen nu
poate fi utilizat individual pentru
prim ajutor nici pH Neutral, și
nici soluția de prim ajutor pentru
clătirea ochilor Plum. Aceste
produse pot neutraliza și pot
clăti fluorura de hidrogen din
ochi, dar nu pot preveni deterio-
rarea puternică a țesuturilor,
prin urmare în aceste cazuri
neapărat este necesar consul-
tarea medicului.

UTILIZAREA RECOMANDATĂ A SOLUȚIEI PH NEUTRAL

Soluția pentru clătirea ochilor pH
Neutral oferă o clătire de 2 minute
în cazul accidentelor provocate de
substanțe acide și alcaline. Utilizați
produsul pH Neutral cu scopul
neutralizării substanței acide sau
alcaline, pentru restabilirea valorii pH
naturale a ochilor. După aceasta se
recomandă continuarea clătirii cu o
soluție de prim ajutor pentru clătirea
ochilor Plum (soluție salină sterilă de
0,9%), până se ajunge la medic.

MATERIALELE PERICULOASE SUNT PREZENTE PESTE TOT

Există locuri de muncă și ramuri industriale în care muncitorii sunt expuși unui risc peste media generală în ceea ce privește accidentele chimice. De exemplu în diverse întreprinderi chimice, în industria de reciclare, în fabricile de ciment și pe șantierele de construcții, sau în domeniul petrochimic și minerit, chiar și în industria alimentară și a hârtiei. În aceste locuri în procesul de întreținere, curățare se utilizează adesea substanțe acide și alcaline puternice. Se poate întâmpla accident în orice moment: este destul un furtun slăbit din întâmplare, sau un acumulator care explodează, și problemele apar imediat. Prin urmare, să aveți întotdeauna la îndemână soluția pentru clătirea ochilor pH Neutral!

CHIAR ȘI CÂTEVA SECUDE POT FI DECISIVE

Substanțele acide și alcaline deteriorează țesuturile, structura pielii și a membranei mucoase. Gravitatea leziunilor depind de următoarele factori:

- Concentrația substanței: substanțele acide și alcaline puternice pot provoca leziuni extrem de grave.
- Temperatura: cu cât este mai mare temperatura, cu atât sunt mai puternice efectele corozive ale substanțelor chimice.
- Durata contactului: cu cât timpul de contact al substanței chimice cu pielea și cu ochii este mai lung, cu atât sunt mai grave leziunile cauzate.


În cazul accidentelor oculare provocate de substanțe chimice, cel mai important lucru este neutralizarea rapidă a acestora până la obținerea valorii pH-ului de 7.4, ceea ce corespunde cu valoarea pH-ului natural al ochiului. Chiar și câteva secunde pot fi decisive: dacă este posibil, substanțele acide sau alcaline trebuie să fie neutralizate înainte ca acestea să ajungă la corneea. În acele locuri unde poate apare riscul accidentelor oculare, este foarte important ca lichidul pentru clătirea ochilor să fie:

- Accesibil cu ușurință
- Utilizabil ușor și rapid
- Eficient

SOLUȚIA PENTRU CLĂTIREA OCHILOR SĂ FIE EFICIENTĂ

Soluția pH Neutral este o soluție tampon de fosfat de 4.9% care neutralizează rapid și eficient substanțele acide și alcaline. Hidrogenul fosfat oferă o protecție eficientă împotriva acizilor, pe când dihidrogenul fosfat neutralizează substanțele alcaline. Eficiența soluției pentru clătirea ochilor pH Neutral este dovedită prin studii științifice. Am testat efectul neutralizant al produsului pH Neutral asupra substanțelor acide și alcaline puternice, și am comparat acesta cu cel al soluției clasice pentru clătirea ochiului, care conține o soluție de clorură de sodiu de 0,9%. Rezultatele testelor au demonstrat clar că pH Neutral, într-o perioadă scurtă de timp a neutralizat majoritatea substanțelor acide și alcaline, și a restabilit valoarea naturală pH a ochilor. Soluția clasică pentru clătirea ochiului a diluat lichidul, reducând în mică măsură efectul coroziv, însă în privința valorii pH-ului au avut loc doar modificări minore (figura 1.).

Figura 1. – Neutralizarea acizilor și alcalinelor tari

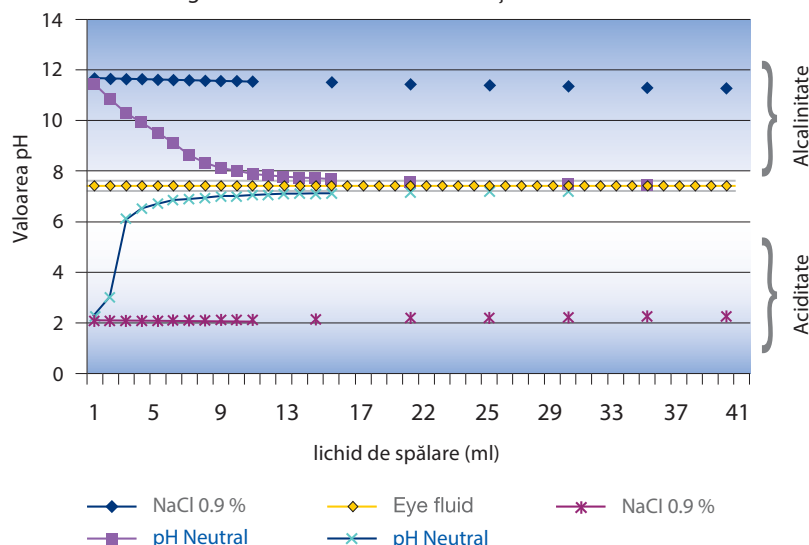

1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.

All documentation is available on request.



**200 ML
PH NEUTRAL**

Acest flacon mic, ușor de utilizat încapă în cel mai mic buzunar al halatului. Este un produs pentru clătirea ochilor cu 4.9% soluție sterilă de tampon de fosfat care neutralizează rapid produsele chimice cu pH acid și alcalin. Flaconul poate fi purtat cu ușurință într-o geantă de brâu specială, în cutia de prim ajutor, sau în cutia de scule. Prevăzut cu capac antișpraf.

Durată clătire: aprox. 2 min.
Prezentare: 10 x 200 ml
Cod produs: 4752



**500 ML
PH NEUTRAL DUO**

Produs pentru clătirea ochilor cu 4.9% soluție sterilă de tampon de fosfat care neutralizează rapid produsele chimice cu pH acid și alcalin. Datorită design-ului DUO permite clătirea simultană a ambilor ochi, astfel este recomandat la locurile de muncă unde există un risc de deteriorare a ochilor într-un accident. Poate fi utilizat individual, dar este potrivit și pentru reîncărcare.

Durată clătire: aprox. 2 min.
Prezentare: 6 x 500 ml
Cod produs: 4801



**1000 ML
PULVERIZATOR PENTRU OCHI
PH NEUTRAL**

Produs pentru clătirea ochilor cu 4.9% soluție sterilă de tampon de fosfat care neutralizează rapid produsele chimice cu pH acid și alcalin. Poate fi utilizat individual la stațiile de lucru, respectiv poate fi depozitat cu ușurință în cutia de scule, sau pe perete. Prevăzut cu capac antișpraf.

Durată clătire: aprox. 2 min.
Prezentare: 6 x 1000 ml
Cod produs: 4746



” **ACCIDENTELE CHIMICE
OCULARE APAR
ATUNCI, CÂND NE
AȘTEPTĂM CEL MAI
PUȚIN...**

Un angajat al companiei franceze SITA și-a salvat vederea datorită pH Neutral DUO. Domeniul de activitate al companiei este reciclarea materialului plastic – de exemplu și flacoanele produselor pentru igienizare. Substanța acidă a unui asemenea produs dintr-un flacon a pătruns în ochiul angajatului. Însă datorită pH Neutral DUO substanța nocivă a putut fi neutralizată imediat în ambii ochi. Astfel angajatul și-a putut relua în următoarea zi activitatea, fără afectarea vederii.



Stații pentru clătirea ochilor în cazul accidentelor mecanice

Stația fixată pe perete este ușor vizibilă, și asigură ajutor imediat în cazul accidentelor

SOLUȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PLUM DUO BOX

Stație pentru clătirea ochilor din polistiren, antipraf, de perete, care conține 2 x 1000 ml soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum. Este recomandată în special la locurile de muncă unde există riscul de leziuni oculare mecanice, și contaminare cauzată de praf și murdărie.

Durată clătire:	aprox. 10 min.
Prezentare:	1
Cod produs:	4816
Dimensiuni:	357 x 252 x 116 mm

ACORDAȚI ATENȚIE PRIMULUI AJUTOR?

Accidentele survin ușor, când sunt neașteptate – în aceste cazuri este târziu să căutați prin dulapuri după cutia de prim ajutor, intervenția trebuie făcută imediat!

Datorită fixării lor pe perete, obiectele necesare primului ajutor sunt ușor accesibile. Puteți opta pentru stațiile cu sistem deschis sau închis. Cea din urmă este utilă pentru mediul de lucru cu mult praf, asigurând flacoanelor depozitarea igienică.

Important: țineți flacoane suplimentare și în afara stațiilor, pentru a putea continua clătirea până la contactarea unui medic.



SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PLUM ÎN CUTIE

Soluție de 200 ml pentru clătirea ochilor Plum în cutie. Cutia de carton protejează flaconul de contaminări, dar la nevoie se poate deschide ușor. Este recomandată pentru reîncărcarea stațiilor pentru clătirea ochilor, sau la locuri de muncă mobile (de exemplu pentru plasarea în vehicule).

Durată clătire:	aprox. 2 min.
Prezentare:	10
Cod produs:	4695
Nr. articol suport de perete:	955904
Dimensiuni:	58 x 58 x 163 mm



SOLUȚIE DE PRIM AJUTOR PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PLUM ÎN CUTIE

Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum 200 ml, cu suport de perete, în cutie. Cutia de carton protejează flaconul de contaminări, dar la nevoie se poate deschide ușor. Este potrivită pentru clătirea rapidă și ușoară, la locurile de muncă cu praf.

Durată clătire:	aprox. 5 min.
Prezentare:	12
Cod produs:	4609
Nr. articol reîncărcător:	4605
Nr. articol suport de perete:	955904
Dimensiuni:	79 x 79 x 214 mm



STAȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PLUM DUO

Stație de perete pentru clătirea ochilor, cu 1000 ml soluție pentru clătirea ochilor Plum DUO. Este recomandată în special pentru stații de lucru mai mici, sau mobile, unde poate fi necesară clătirea simultană a ambilor ochi.

Durată clătire:	aprox. 5 min.
Prezentare:	1
Cod produs:	4802
Dimensiuni:	375 x 180 x 95 mm



STAȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PLUM ÎN CUTIE

Stație pentru clătirea ochilor din polistiren, antipraf, montabilă pe perete, care conține 2 x 500 ml soluție Plum de prim ajutor pentru clătirea ochilor. Este recomandată în special în locuri murdare, pline de praf, sau la stațiile de lucru mobile.

Durată clătire: aprox. 10 min.
Prezentare: 1
Cod produs: 4650
Dimensiuni: 280 x 230 x 110 mm

POATE FI MONTATĂ ȘI CU DISPOZITIVE DE ÎNCĂLZIRE.

Cod produs: 4649

POATE FI MONTATĂ CU UȘURINȚĂ

Stațiile de perete pot fi montate ușor, și sunt prevăzute cu pictogramă, care ilustrează utilizarea corectă a produselor.



STAȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PLUM

Stație de perete cu soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum 500 ml. Este recomandată în special pentru locurile de muncă mai mici și mobile.

Durată clătire: aprox. 5 min.
Prezentare: 1
Cod produs: 4611
Dimensiuni: 300 x 170 x 80 mm



STAȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PLUM MAXI

Stație de perete cu soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum 2 x 1000 ml. Este recomandată în special pentru locurile de muncă mai mici sau mobile, unde poate fi nevoie și de clătirea îndelungată a ochilor. Prevăzută cu capac antipraf.

Durată clătire: aprox. 20 min.
Prezentare: 1
Cod produs: 4708
Dimensiuni: 375 x 260 x 95 mm



STAȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PLUM

Stație de perete cu soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum 2 x 500 ml. Este recomandată în special pentru medii de lucru curate, neprăfuite, însă există riful de deteriorare mecanică a ochilor.

Durată clătire: aprox. 10 min.
Prezentare: 1
Cod produs: 4694
Dimensiuni: 290 x 228 x 80 mm



Țevile pline cu fluide aflate sub presiune se fisurează cu ușurință, sau se slăbește un furtun... În aceste cazuri se eliberează materiale corosive. Așa se produc cel mai des accidente chimice. Dacă substanța chimică a pătruns în ochi, fiecare secundă contează pentru păstrarea vederii!

Stații pentru clătirea ochilor în cazul accidentelor chimice oculare

Datorită combibox-ului vă puteți pregăti atât pentru accidente chimice mai ușoare, cât și pentru cele mai grave.

PUTEREA COMUNĂ A PRIMULUI AJUTOR PLUM ȘI AL SOLUȚIILOR PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PH NEUTRAL

În cazul pătrunderii în ochi a materialelor acide sau alcaline, propunem clătirea combinată – prima dată cu pH Neutral, apoi cu soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum. De aceea am realizat o ofertă de boxe combinate, prin care se poate interveni imediat pentru neutralizarea substanțelor chimice pătrunse în ochi, apoi clătirea se poate continua cu soluția de clorură de sodiu până în momentul contactării unui medic.

Dacă lucrați cu materiale chimice fluide, atunci vă propunem pH Neutral DUO, asigurând clătirea concomitentă a ambilor ochi.

Stațiile deschise pentru clătirea ochilor sunt recomandate locurilor de muncă curate, fără praf – de exemplu în laboratoare. Stațiile închise pentru clătirea ochilor au fost realizate pentru locurile de muncă murdare, cu mult praf. Toate stațiile pot fi fixate cu ușurință, fiind prevăzute cu oglindă și pictograme. Acestea din urmă oferă indicații pentru utilizarea corectă.



SOLUȚIE PENTRU CLĂTIREA OCHILOR PH NEUTRAL ÎN CUTIE

Soluție pentru clătirea ochilor pH neutral în cutie, 200 ml. Cutia de carton protejează flaconul de contaminări, dar la nevoie se poate deschide ușor. Neutralizează rapid substanțele chimice cu pH acid și alcalin. Este recomandată pentru reîncărcarea stațiilor, dar este în special practic la locuri de muncă mobile, pentru plasarea în vehicule.

Durată clătire:	aprox. 2 min.
Prezentare:	10
Cod produs:	4755
Cod produs suport de perete:	955904
Dimensiuni:	58 x 58 x 163 mm



ȘERVEȚELE PENTRU CURĂȚAREA RĂNILOR QUICKCLEAN CU SUPTOR DE PERETE

Cutia conține 40 buc. șervețele pentru curățarea rănilor, cu care putem dezinfecța tăieturile, leziunile mai mici. Produsul este prevăzut cu un suport de perete, astfel poate fi plasat și în apropierea locului de muncă. Șervețelele sunt ambalate individual, și impregnate cu apă sterilă. Dimensiunea șervețelor: 130 x 200 mm.

Prezentare:	6 x 40
Cod produs:	5550
Dimensiuni:	150 x 80 x 64 mm



STAȚIE DE PRIM AJUTOR

Stație de prim ajutor montabilă pe perete cu soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor, dozator plasturi, șervețele pentru curățarea rănilor, oglindă și pictogramă.

CONȚINUT:	Cikkszám:
1 x 500 ml Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor	4604
1 x 40 Șervețele pentru curățarea rănilor QuickClean	5551
1 x Dozator plasturi elastici QuickFix, cu 90 buc. de plasturi	5507

Prezentare:	6 x 40
Cod produs:	5101
Dimensiuni:	300 x 515 x 85 mm



PLUM COMBI-BOX DUO

Stație din polistiren, antipraf, de perete, care conține 500 ml soluție pentru clătirea ochilor pH Neutral DUO, și 500 ml soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum DUO. Este recomandată în special la locurile de muncă și întreprinderile cu mult praf, unde pot avea loc accidente care afectează de obicei ambii ochi simultan. Cu Combi Box DUO vă puteți pregăti atât în privința leziunilor mecanice cât și a leziunilor chimice.

Durată clătire: pH Neutral aprox. 2 min.
Soluție salină sterilă aprox. 2 min.

Prezentare: 1
Cod produs: 4862
Dimensiuni: 280 x 230 x 110 mm



PLUM COMBI-BOX DUO MAXI

Stație din polistiren, antipraf, de perete, care conține 500 ml soluție pentru clătirea ochilor pH Neutral DUO, și 1000 ml soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum DUO. Este recomandată în special la locurile de muncă și întreprinderile cu mult praf, unde pot avea loc accidente care afectează de obicei ambii ochi simultan. Cu Combi Box DUO vă puteți pregăti atât în privința leziunilor mecanice cât și a leziunilor chimice.

Durată clătire: pH Neutral aprox. 2 min.
Soluție salină sterilă aprox. 5 min.

Prezentare: 1
Cod produs: 4810
Dimensiuni: 357 x 252 x 116 mm



PLUM COMBI-BOX

Stație din polistiren, antipraf, de perete, care conține 200 ml soluție pentru clătirea ochilor pH Neutral, și 500 ml soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum. Este recomandată în special la locurile de muncă și întreprinderile cu mult praf, unde pot apărea atât leziuni mecanice cât și leziuni chimice.

Durată clătire: pH Neutral aprox. 2 min.
Soluție salină sterilă aprox. 5 min.

Prezentare: 1
Cod produs: 4787
Dimensiuni: 280 x 230 x 110 mm
POATE FI MONTATĂ ȘI CU DISPOZITIVE DE ÎNCĂLZIRE
Cod produs: 4664



STAȚIE PULVERIZATOR DE OCHI PH NEUTRAL

Stație montabilă pe perete cu soluție pentru clătirea ochilor pH Neutral 1000 ml, care neutralizează rapid soluțiile acide și alcaline. La locul de muncă poate fi montată ușor pe perete. Prevăzută cu capac antipraf.

Durată clătire: aprox. 2 min.
Prezentare: 1
Cod produs: 4741
Dimensiuni: 300 x 160 x 95 mm



PLUM COMBI-STATION

Stație de perete, care conține 200 ml pH Neutral și 500 ml soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum. Este recomandată în special la locurile de muncă unde pot apărea atât accidente mecanice cât și accidente chimice la nivelul ochiului.

Durată clătire: pH Neutral aprox. 2 min.
Soluție salină sterilă aprox. 5 min.
Prezentare: 1
Cod produs: 4773
Dimensiuni: 290 x 228 x 80 mm



PLUM COMBI-STATION DUO

Stație de perete, care conține 500 ml pH Neutral DUO și 1000 ml soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum DUO. Este recomandată în special la locurile de muncă unde pot apărea atât accidente mecanice cât și accidente chimice la nivelul ochiului, și există un risc de afectare simultană a ambilor ochi.

Durată clătire: pH Neutral aprox. 2 min.
Soluție salină sterilă aprox. 5 min.
Prezentare: 1
Cod produs: 4803
Dimensiuni: 375 x 250 x 95 mm

Quick

FIX

SISTEM UNIC DE DOZARE QUICKFIX

- Asigură acces imediat și vizibil la plasturi și la fiolele pentru clătirea ochilor.
- Plasturele scos din dozator este gata de utilizare.
- Fiecare pasture este ambalat individual.
- Poate fi utilizat cu ușurință și cu o singură mână.
- Poate fi reîncărcat oricând.
- Se poate observa ușor dacă dozatorul s-a golit.
- Oprește simplu sângerările minore, fără a mânji și alți plasturi.
- Dozatorul mic poate fi montat cu ușurință oriunde.
- Este dotat cu un raft, care oferă loc și pentru alte obiecte importante, mai mici.
- Se poate închide cu cheie.



QUICKFIX - ELASTIC

Dozator plasture de perete, cu 90 buc. plasturi elastici. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic - care permit respirarea pielii.



QUICKFIX - IMPERMEABIL

Dozator plasture de perete, cu 90 buc. plasturi impermeabili, potrivit în special pentru locuri de muncă umede. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic - care permit respirarea pielii.



QUICKFIX - MIXT

Dozator plasture de perete, cu 45 buc. plasturi elastici și 45 buc. plasturi impermeabili. Cele două plasturi se adaptează la necesitățile schimbătoare ale locului de muncă.

Prezentare:	1
Cod produs:	5502
Cod produs reîncărcător:	5512
Dimensiunea sistemului dozator:	135 x 230 x 32 mm
Dimensiunea plasture:	72 x 25 mm

Prezentare:	1
Cod produs:	5501
Cod produs reîncărcător:	5511
Dimensiunea sistemului dozator:	135 x 230 x 32 mm
Dimensiunea plasture:	72 x 25 mm

Prezentare:	1
Cod produs:	5507
Cod produs reîncărcător:	5512 & 5511
Dimensiunea sistemului dozator:	135 x 230 x 32 mm
Dimensiunea plasture:	72 x 25 mm

QuickFix ajutor rapid în cazul accidentelor minore, zilnice

Cu dozatorul montat pe perete puteți economisi foarte mult timp. Lipiți doar plasturele și puteți să continuați munca!

AJUTOR RAPID ȘI IGIENIC PENTRU LEZIUNI MINORE

Accidente minore se pot produce zilnic la locul de muncă. În cazul leziunilor minore e suficient aplicarea unui plasture. Alegeți plasturele potrivit locului Dvs. de muncă – sau combinațiile corespunzătoare! Oferim oportunități și muncitorilor din mediul general sau umed, chiar și celor din domeniul alimentar. Nu pierdeți vremea: scoateți un plasture din dozator, aplicați-l și puteți continua munca! QuickFix rezolvă rapid, igienic și eficient problemele.



Scoateți plasturele din dozator. Acesta este utilizabil imediat...



...poate fi aplicat cu o singură mână.

PUTEȚI ALEGE DINTRE 3 TIPURI ȘI 2 DIMENSIUNI

PLASTURI ELASTICI

Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic, purtarea lor este confortabilă. Se adaptează la suprafața pielii, la mișcările mâinilor.

PLASTURI IMPERMEABILI

Plasturi impermeabile potrivite pentru locuri de muncă umede.

PLASTURI CU FIBRE METALICE

Plasturi cu fibre metalice concepute în special pentru industria alimentară. Datorită culorilor stridente și a fibrelor metalice încorporate pot fi vizibile clar și pot fi evidențiate cu detector de metale.

QUICKFIX LONG

Plasturi extra lungi. Pot fi înfășurate chiar și de mai multe ori în jurul degetelor, asigurând faptul că plasturele rămâne fixat în timpul lucrului.



QUICKFIX - CU FIBRE METALICE

Dozator plasture de perete, cu 90 buc. plasturi de culoare albastră, cu fibre metalice, care pot fi evidențiate cu detector de metale. Sunt concepute în special pentru industria alimentară. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic - care permit respirarea pielii.



QUICKFIX LONG - ELASTIC

Dozator plasture de perete, cu 60 buc. plasturi elastici lungi, care se adaptează la suprafața pielii, și oferă o senzație de confort. Pot fi înfășurate chiar și de mai multe ori în jurul degetelor, asigurând că plasturele rămâne fixat în timpul lucrului. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic - care permit respirarea pielii.



QUICKFIX LONG - CU FIBRE METALICE

Dozator plasture de perete, cu 60 buc. plasturi de culoare albastră, cu fibre metalice, care pot fi evidențiate cu detector de metale. Sunt concepute în special pentru industria alimentară. Pot fi înfășurate chiar și de mai multe ori în jurul degetelor, asigurând că plasturele rămâne fixat în timpul lucrului. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic.

Prezentare:	1
Cod produs:	5503
Cod produs reincărcător:	5513
Dimensiunea sistemului dozator:	135 x 230 x 32 mm
Dimensiunea plasture:	72 x 25 mm

Prezentare:	1
Cod produs:	5528
Cod produs reincărcător:	5508
Dimensiunea sistemului dozator:	135 x 230 x 32 mm
Dimensiunea plasture:	120 x 20 mm

Prezentare:	1
Cod produs:	5529
Cod produs reincărcător:	5509
Dimensiunea sistemului dozator:	135 x 230 x 32 mm
Dimensiunea plasture:	120 x 20 mm



QUICKFIX & RINSE

Sistem de dozare de perete, cu 5 buc. fiole pentru clătirea ochilor, care conțin soluție salină sterilă de 0,9%; respectiv 45 buc. plasturi elastici. Sistemul de dozare oferă o asistență simplă, rapidă și igienică în caz de accidente minore (ochi iritați, leziuni, tăieturi mici).

Prezentare:	1
Cod produs:	4631
Cod produs reîncărcător:	5512 & 5160
Dimensiunea sistemului dozator:	190 x 230 x 32 mm
Dimensiunea plasture:	72 x 25 mm



QUICKRINSE

Sistem de dozare de perete, cu 10 buc. fiole pentru clătirea ochilor, care conțin 20 ml de soluție salină sterilă de 0,9%. Sistemul de dozare oferă o asistență simplă, rapidă și igienică în caz de accidente oculare minore, de exemplu, atunci când praful sau murdăria pătrunde în ochi; sau în cazul în care ochii devin uscați în timpul lucrului.

Prezentare:	1
Cod produs:	4632
Cod produs reîncărcător:	5160
Dimensiunea sistemului dozator:	135 x 230 x 32 mm



Fiole mici în cazul accidentelor minore

QuickRinse este o soluție economică în cazul leziunilor oculare minore.

QUICKRINSE - PENTRU CLĂTIREA RAPIDĂ!

Ochiul este organul cel mai vulnerabil. Uscăciunea incipientă sau iritația ochiului poate fi neplăcută mai ales la locul de muncă. Poate provoca durere sau sensibilitate la lumină, ceea ce poate perturba activitatea. QuickRinse ajută la restabilirea stării de bine.


Fiecare fiolă conține 20 ml de soluție pentru clătirea ochilor, ce se poate utiliza împotriva uscăciunii oculare sau a iritației provocate de impurități minore (ex. praf). Combinația QuickFix & Rinse asigură accesibilitatea plasturilor și a fiolelor cu soluție pentru clătirea ochilor.

Întotdeauna la îndemână

Realizări practice

- să aveți la îndemână primul ajutor!

Plasturile și fiolele pentru clătirea ochilor sunt accesibile și în formă practică, portabilă. Păstrați-le întotdeauna la îndemână: în cutia de scule, în compartimentul pentru mănuși al vehiculelor, în geantă, în buzunar sau în cutia generală pentru prim ajutor. Astfel veți fi pregătit pentru accidentele minore, bruște, survenite pe neașteptate.

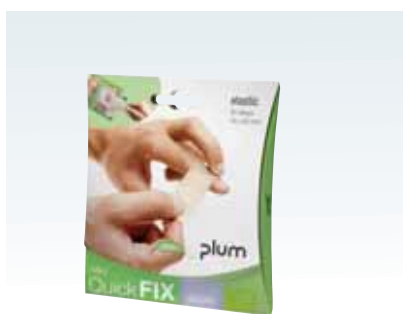

QUICKFIX MINI

Pachet mic în format practic, cu 30 buc. plasturi elastici. Poate fi transportat cu ușurință în acele locuri unde puteți avea nevoie de plasturi. Fiecare plasture este ambalat în mod individual, și este gata pentru utilizare imediată. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic, se adaptează la suprafața pielii, în timp ce permit respirația acesteia.

Prezentare: 30 x 30
Cod produs: 5504
Dimensiunea plasture: 72 x 25 mm



QUICKRINSE MINI

Pachet mic în format practic, cu 4 buc. fiole pentru clătirea ochilor, care conțin 20 ml de soluție salină sterilă de 0,9%. Cu ajutorul acestora se poate atenua uscăciunea oculară, sau iritațiile cauzate de praf și murdărie. Fiolele pot fi deschise cu ușurință printr-o singură răsucire, și pot fi utilizate imediat. Datorită ambalajului mic, QuickRinse Mini poate fi transportat oriunde.

Prezentare: 5 x 4
Cod produs: 4619



GEANTĂ DE BRĂU PENTRU FLACON DE 200 ML

Borsetă practică care poate fi un accesoriu a hainelor de lucru. Se poate deschide ușor, și permite ca primul ajutor să fie întotdeauna la îndemână. În interiorul acesteia poate fi depozitat cu siguranță și igienic oricare soluție pentru clătirea ochilor de 200 ml.

Prezentare: 10
Cod produs: 4692

QuickSafe® ajutor rapid, simplu și imediat

Fiți liniștit:
la nevoie va fi
întotdeauna totul la
îndemână.

STAȚII PERSONALIZATE DE PRIM AJUTOR

Încărcați-vă stația de prim ajutor cu produse corespunzătoare nevoilor locului de muncă! Soluție pentru clătirea ochilor de impurități. pH Neutral pentru neutralizarea materialelor acide și alcaline. Plasture adaptat condițiilor de muncă. Gel pentru arsuri cu care puteți trata leziunile de arsură ușoare, mai puțin grave. Fiolă pentru clătirea ochiului pentru ochiul uscat, iritat. Șervețele pentru curățarea rănilor în cazul celor minore. Bandaje de compresie pentru tratarea imediată a accidentelor grave. Toate acestea în spatele unui geam transparent, astfel puteți sesiza imediat produsul de care aveți nevoie.

” **OBIECTELE
IMPORTANTE SĂ FIE
ÎNTOTDEAUNA LA
ÎNDEMÂNĂ.**

Compania Spaencom se ocupă de producția elementelor de beton A/S. Compania a ales Plum QuickSafe pentru asigurarea condițiilor de siguranță la locul de muncă a celor 500 de angajați. „Am optat pentru Plum QuickSafe, deoarece stațiile de prim ajutor pot fi ajustate cu ușurință la necesitățile specifice anumitor domenii de activitate. De exemplu la punctele de lucru unde elementele din beton sunt spălate cu acid, am amplasat în stații soluția pH Neutral pentru clătirea ochilor și soluție salină. QuickSafe conține elementele de bază, ce poate fi amplasat și în apropierea punctului de lucru. Astfel dacă se produce un accident, ajutor va fi la îndemână.” Jany Johannsen, Environment and Safety Coordinator





QuickSafe® EMPTY

DECIZIA ESTE A DUMNEAVOASTRĂ!
 Puteți opta pentru libertate deplină de a selecta conținutul stației de prim ajutor, conform necesităților!



ALEGEȚI QUICKSAFE EMPTY ȘI ÎNCĂRCAȚI-L CU PRODUSELE ADECVATE!

Dacă dintre cele patru stații QUICKSAFE nici una nu corespunde în totalitate specificului Dvs., stația de prim ajutor poate fi personalizată 100%. Acest lucru vă prezentăm detaliat pe paginile următoare. Alegeți-vă pur și simplu stația fixabilă goală și căutați produsele noastre de prim ajutor corespunzătoare nevoilor Dvs.

Prezentare:	1
Cod produs:	5173
Dimensiuni:	430 x 253 x 92 mm

Ajutorul este la îndemână

Accesibilitatea ușoară crește gradul de siguranță.

Cu ajutorul QuickSafe puteți colecta la un loc cele mai importante produse de prim ajutor, pe care le puteți plasa cu siguranță în apropierea locului de muncă, - acolo unde este mare nevoie de prezența acestora. Stația de prim ajutor nu ocupă un loc mai mare pe perete decât o hârtie format A3, prin urmare poate fi montată oriunde.

Datorită panoului frontal transparent poate fi urmărit foarte ușor conținutul stației. Veți vedea nevoile reîncărcării, și totodată plasticul protejează produsele de praf și alte impurități. Soluție igienică și elegantă.



**CITIȚI CODUL QR,
 SAU VIZITAȚI SITE-UL
 PLUM-QUICKSAFE.HU, PENTRU
 A CUNOAȘTE CELE MAI RECENTE
 SOLUȚII DE PRIM AJUTOR**



QuickSafe® BASIC

PUNCTUL PERFECT DE PLECARE

QuickSafe Basic oferă flexibilitate completă: puteți alege ce fel de produse doriți să plasați pe rafturile Dvs.



AVEȚI NEVOI SPECIALE ÎN PRIVINȚA STAȚIEI DE PRIM AJUTOR?

Baza întregului sistem QuickSafe este soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor Plum. QuickSafe Basic pe lângă soluția de prim ajutor pentru clătirea ochilor conține și pH Neutral, fiole pentru clătirea ochilor, și plasturi. Cu privire la produsele suplimentare veți decide Dvs. Primul raft al stației poate fi încărcat cu produse necesare companiei Dvs.

CONȚINUT:	Cod produs:
2 x 500 ml Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml Fiole QuickRinse	5160
1 x Reîncărcător plasturi elastici QuickFix cu 45 buc. de plasturi	5512

Prezentare:	1
Cod produs:	5170
Dimensiuni:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® COMPLETE

SOLUȚIE COMPLETĂ

Soluție pentru clătirea ochilor, completată cu pH Neutral și fiole pentru clătirea ochilor; bandaj de compresie; șervețele pentru curățarea rănilor; plasturi și gel pentru arsuri pentru tratarea arsurilor minore.



GAMĂ LARGĂ DE PRODUSE

QuickSafe Complete oferă o gamă largă de soluții de prim ajutor. Puteți găsi soluții începând de la situațiile cele mai critice până la leziunile zilnice.

CONȚINUT:	Cod produs:
18 x Gel pentru arsuri QuickCool	5150
1 x Bandaj de compresie QuickStop	5152
20 x Șervețele pentru curățarea rănilor QuickClean	5151
2 x 500 ml Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml Fiole QuickRinse	5160
1 x Reîncărcător plasturi elastici QuickFix cu 45 buc. de plasturi	5512

Prezentare:	1
Cod produs:	5174
Dimensiuni:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® FOOD INDUSTRY

SOLUȚII PENTRU INDUSTRIIA ALIMENTARĂ

Această stație este încărcată cu produse necesare pentru industria alimentară.



SOLUȚIE RAPIDĂ ȘI SIGURĂ, DETECTABILITATE ÎNCORPORATĂ

Stația de prim ajutor formată pentru industria alimentară, cantine și restaurante conține printre altele plasturi cu fibre metalice, șervețele pentru curățarea rănilor, gel pentru arsuri și bandă de compresie.

CONȚINUT:	Cod produs:
18 x Gel pentru arsuri QuickCool	5150
1 x Bandaj de compresie QuickStop	5152
20 x Șervețele pentru curățarea rănilor QuickClean	5151
2 x 500 ml Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x Plasturi detectabili QuickFix 45 buc.	5513
1 x Plasturi detectabili, lungi QuickFix, 30 buc.	5509

Prezentare:	1
Cod produs:	5175
Dimensiuni:	430 x 253 x 92 mm



QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

PROTECȚIE ÎN CAZ DE ACCIDENTE CHIMICE

Accidentele provocate de substanțe acide și alcaline pot avea chiar și efecte care pun viața în pericol, dacă nu acordăm prim ajutor la momentul potrivit.



CÂND CÂTEVA SECUDE DECID FINALUL ACCIDENTULUI

În cazul în care la locul Dvs. de muncă pot apărea accidente chimice, accesul eficient la soluțiile pentru clătirea ochilor are o importanță foarte mare. Stația de prim ajutor formată pentru industria chimică conține printre altele soluție pentru clătirea ochilor pH Neutral DUO, cu care puteți clăti simultan ambii ochi.

CONȚINUT:	Cod produs:
1 x 500 ml Soluție de prim ajutor pentru clătirea ochilor DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml Fiole QuickRinse	5160
1 x Plasturi elastici QuickFix, 45 buc.	5512

Prezentare:	1
Cod produs:	5171
Dimensiuni:	430 x 253 x 92 mm



QUICKSTOP

Trusă de bandaj de compresie pentru acordarea unui prim ajutor eficient, care poate fi utilizată în caz de leziuni minore, sau hemoragii mici abundente. Bandajul de compresie steril este elastic, testat dermatologic, nu se lipește de piele, îi permite acestuia să respire.

CONȚINUTUL TRUSEI:

1 x bandaj de compresie,
17 x 17 cm
2 x bandaj de compresie,
12 x 7,5 cm

Prezentare: 6 x 3
Cod produs: 5152



ȘERVEȚELE PENTRU CURĂȚAREA RĂNILOR QUICKCLEAN

40 buc. șervețele în cutie pentru curățarea rănilor, a tăieturilor, zgârieturilor mai mici. Șervețelele sunt ambalate individual, și impregnate cu apă sterilă. Sunt potrivite și pentru reîncărcarea stațiilor de prim ajutor, sau a dozatoarelor montate pe suport de perete.

Prezentare: 13 x 20
Cod produs: 5551



QUICKCLEAN

Șervețele pentru curățarea rănilor în cutie, pentru curățarea rănilor, a tăieturilor, zgârieturilor mai mici. Șervețelele sunt ambalate individual, și impregnate cu apă sterilă. Pot fi utilizate în mod individual, sau pentru reîncărcarea stațiilor de prim ajutor QuickSafe. Cutia conține 20 de șervețele.

Prezentare: 6 x 20
Cod produs: 5151



QUICKCOOL

Gel pentru arsuri pentru tratarea imediată a arsurilor minore. Cu efect răcitor și calmant al pielii. Conține ulei din arbore de ceai. Poate fi utilizat în mod individual, sau pentru reîncărcarea stațiilor de prim ajutor QuickSafe. Cutia conține 18 bucăți.

Prezentare: 6 x 18
Cod produs: 5150

Asigurați reîncărcarea

Puteți reîncărca trusa Dvs. de prim ajutor cu următoarele produse

Orice stație de prim ajutor, sau dozatorul de plasture QuickFix poate fi reîncărcat cu ușurință cu următoarele produse. Ba chiar, se poate adăuga și produse noi la stația existentă de prim ajutor. Fiecare stație poate fi concepută în mod flexibil, astfel vă putem oferi soluții pentru a satisface nevoile companiei Dvs.



REZERVĂ – PLASTURI IMPERMEABILI QUICKFIX

45 buc. plasturi impermeabili potrivit în special pentru locuri de muncă umede. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic - care permit respirația pielii.

Prezentare: 6 x 45
Cod produs: 5511
Dimensiunea plasture: 72 x 25 mm



REZERVĂ – PLASTURI ELASTICI QUICKFIX

45 buc. plasturi elastici, care se adaptează la suprafața pielii, la mișcările mâinii. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic - care permit respirația pielii.

Prezentare: 6 x 45
Cod produs: 5512
Dimensiunea plasture: 72 x 25 mm



REZERVĂ – PLASTURI CU FIBRE METALICE QUICKFIX

45 buc. plasturi cu fibre metalice de culoare albastru, care pot fi evidențiate cu detector de metale. Sunt concepute în special pentru industria alimentară. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic - care permit respirația pielii.

Prezentare: 6 x 45
Cod produs: 5513
Dimensiunea plasture: 72 x 25 mm



REZERVĂ – PLASTURI ELASTICI QUICKFIX LONG

30 buc. plasturi elastici lungi, care se adaptează la suprafața pielii, și oferă o senzație de confort. Pot fi înfășurate chiar și de mai multe ori în jurul degetelor, ceea ce asigură faptul că plasturile rămân fixate și în timpul lucrului. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic - care permit respirația pielii.

Prezentare: 6 x 30
Cod produs: 5508
Dimensiunea plasture: 120 x 20 mm



REZERVĂ – PLASTURI CU FIBRE METALICE QUICKFIX LONG

30 buc. plasturi cu fibre metalice lungi, care pot fi evidențiate cu detector de metale. Sunt concepute în special pentru industria alimentară. Pot fi înfășurate chiar și de mai multe ori în jurul degetelor, ceea ce asigură faptul că plasturile rămân fixate și în timpul lucrului. Plasturile sunt dezvoltate din textile testate dermatologic.

Prezentare: 6 x 30
Cod produs: 5509
Dimensiunea plasture: 120 x 20 mm



REZERVĂ QUICKRINSE

5 buc. fiole pentru clătirea ochilor, cu 20 ml soluție salină sterilă de 0,9%. Sunt potrivite pentru reîncărcarea stațiilor QuickSafe, QuickFix & Rinse și QuickRinse.

Prezentare: 4 x 5
Cod produs: 5160

Plum Magyarország Kft. /Srl./
8200 Veszprém,
str. Erdész nr. 4.

Tel./Fax: +36 88 326006
E-mail: info@plum.hu

plum