

# Razpršilec za čiščenje ran in izpiranje oči

Aerosol z 0,9 % sterilne raztopine natrijevega klorida.


Hitra in učinkovita pomoč v samo nekaj sekundah – za kožo in oči!

Nov razpršilec za čiščenje poškodb in izpiranje oči Plum omogoča neposredno in takojšnjo prvo pomoč v primeru manjših poškodb (na primer, manjših prask, ureznin ali v primeru vdora prahu ali umazanije v oko). Pomaga zmanjšati tveganje za nadaljnje okužbe ali poškodbe.

Razpršilec za čiščenje ran in izpiranje oči Plum je prenosen in enostaven za uporabo. Vsebuje sterilno raztopino natrijevega klorida. Uporaba razpršilca je neboleča in omogoča enakomerno izpiranje pod katerim koli kotom. 0,9 % sterilne raztopine natrijevega klorida je dovolj močno, da očisti poškodbe, ki jih povzročijo tuje in umazanije, hkrati pa je dovolj nežno, zaradi česar je primerno tudi za izpiranje oči. Priporočamo ga za uporabo v industrijskem sektorju, proizvodnih linijah in laboratorijih, kot tudi prevoznikom nevarnega blaga, policistom ter v primeru zaščite in reševanja po nesrečah.

## PREDNOSTI IZDELKA:


- Enostavna in hitra uporaba, tudi z eno roko.
- Varno, natančno in učinkovito izpiranje – z zaščito pred prahu, ki šobo ščiti pred umazanijo.
- Enostaven za prenos, nevnetljiv aerosol.
- Vsebina izdelka se lahko uporabi 100 %.
- Ekološko sprejemljiv; lahko se v celoti reciklira.
- Hipoalergenski izdelek.
- Sterilna rešitev – brez konzervansov!
- V neodprtem stanju je enako učinkovit tudi po 3 letih. Datum uporabe izdelka je natisnjen na dnu škatle.

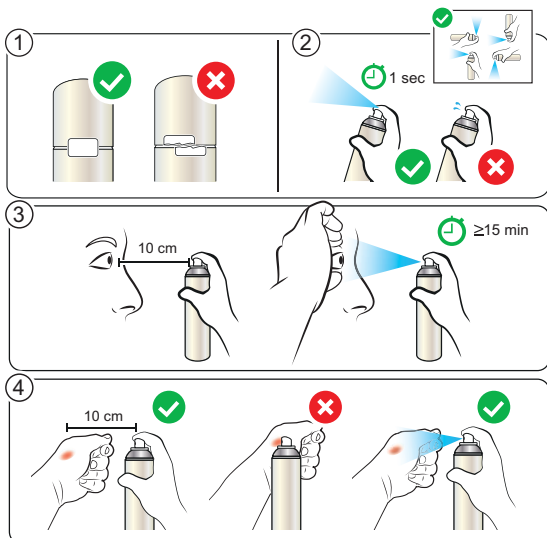

## NAVODILA ZA UPORABO:

- Razpršilec se lahko uporablja, dokler ni izprazen; tekočina ostane sterilna do zadnje kapljice.
- Izdelek – v kolikor predhodno ni bil uporabljen – omogoča neprekinjeno izpiranje celo do 15 minut.
- Pred uporabo očistite šobe: kratko razpršite v zrak!
- Razpršilec je treba uporabljati z razdalje približno 10 cm od poškodovanega mesta (oko, koža).
- Pritisnite šobo in razpršite tekočino enakomerno v oko ali na poškodbo.
- Šoba ne sme priti v neposreden stik s poškodbo ali z očesom!
- Izdelek ne uporabljajte, če je šoba zamašena!

Nežen, vendar učinkovit razpršilec za čiščenje ran in izpiranje oči

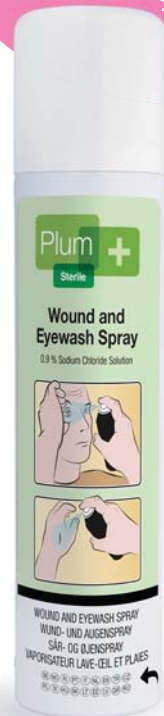

RAZPRŠILEC ZA ČIŠČENJE POŠKODB IN IZPIRANJE OČI PLUM, 250 ML, Z ZAŠČITO PRED PRAHU

- Čas izpiranja: ≥ 15 minut
- Velikost: 240 x Ø 52 mm
- Pakiranje: 12 x 250 ml
- Številka izdelka: 4554
- Pakiranje: 24 x 250 ml
- Številka izdelka: 45540

Razpršilec za čiščenje ran in izpiranje oči Plum razpolaga s certifikatom CE v skladu s klasifikacijami direktive o medicinskih pripomočkih.